

Roger™ Table Mic

Uživatelská příručka



roger



PHONAK
life is on

Obsah

| | |
|--|-----------|
| 1. Úvod | 4 |
| 2. Seznamte se s Roger Table Mic | 6 |
| 2.1 Obsah balení | 6 |
| 2.2 Jak Roger Table Mic pracuje | 7 |
| 2.3 Popis zařízení | 8 |
| 2.4 Světelné indikátory | 9 |
| 3. Začínáme | 10 |
| 3.1 Nastavení zdroje napájení | 10 |
| 3.2 Nabíjení Roger Table Mic | 12 |
| 3.3 Nastavení dálkového ovládání | 14 |
| 3.4 Zapnutí a vypnutí | 15 |
| 3.5 Používání přijímačů Roger | 16 |
| 3.6 Připojení přijímače | 17 |
| 3.7 Připojení dálkového ovládání | 19 |
| 4. Používání Roger Table Mic | 20 |
| 4.1 Připojení k multimediálním zařízením | 21 |
| 5. Přidání dalších mikrofonů | 22 |
| 5.1 Připojení | 22 |
| 5.2 Přidání dalších mikrofonů | 25 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| 6. | Další funkce | 27 |
| 6.1 | Ztlumení | 27 |
| 6.2 | Odpojení zařízení Roger (NewNet) | 28 |
| 7. | Řešení problémů | 29 |
| 8. | Důležité informace | 32 |
| 8.1 | Důležité bezpečnostní informace | 32 |
| 8.2 | Výstrahy | 33 |
| 8.3 | Informace týkající se bezpečnosti výrobku | 35 |
| 8.4 | Další důležité informace | 37 |
| 9. | Servis a záruka | 38 |
| 9.1 | Platnost záruky | 38 |
| 9.2 | Mezinárodní garance | 38 |
| 9.3 | Omezení záruky | 39 |
| 10. | Informace a vysvětlení k symbolům | 40 |

1. Úvod

Blahopřejeme vám k zakoupení stolního mikrofonu Roger Table Mic od společnosti Phonak. Stolní mikrofon Roger Table Mic je bezdrátové zařízení, který vám umožní plně se zapojit do malých i velkých jednání. Stačí jej položit na stůl. Zařízení rozliší mluvené slovo účastníků a potlačí ruchy v pozadí. Díky diskrétnímu vzhledu dokonale zapadne mezi ostatní konferenční vybavení.

Stolní mikrofon Roger Table Mic je špičkový švýcarský výrobek od společnosti Phonak, jež patří mezi světovou elitu v oboru poslechové technologie.

Prostudujte si pečlivě tyto pokyny, abyste plně využili všechny funkce, které stolní mikrofon Roger Table Mic nabízí.

V případě otázek se obraťte na svého poskytovatele zařízení nebo na místní servisní centrum značky Phonak.

Phonak – life is on

www.phonak.com




2. Seznamte se s Roger Table Mic


2.1 Obsah balení




1 nebo 2 stolní
mikrofony Roger

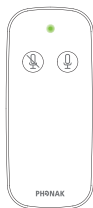


Dálkové ovládání

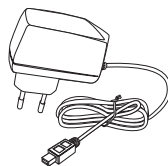


Napájecí zdroj
s lokálním adaptérem
a nabíjecím kabelem

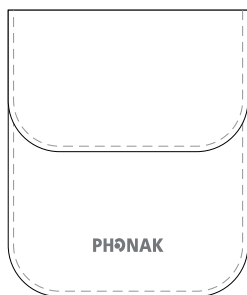

Ochranný obal

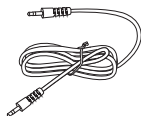

Audio kabel

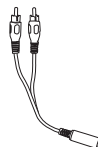


Adaptér RCA / cinch



Stručná příručka
pro nastavení

2.2 Jak Roger Table Mic pracuje


Stolní mikrofon Roger Table Mic přenáší hlasy účastníků konference přímo do vašich uší. Systém se skládá ze tří hlavních prvků: sluchadel, přijímačů Roger a jednoho či více stolních mikrofonů Roger Table Mic.

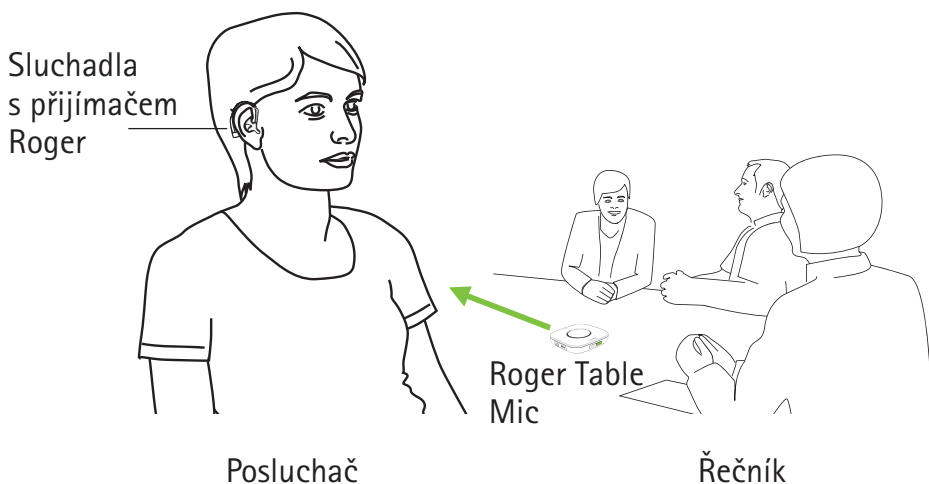

Roger Table Mic a sluchadla obvykle fungují v dosahu do 20 metrů. Nezapomeňte, že lidské tělo či zeď mohou dosah snižovat. Největší dosah získáte, když Roger Table Mic vidíte (když se nachází ve vašem zorném poli).


2.3 Popis zařízení

Roger Table Mic

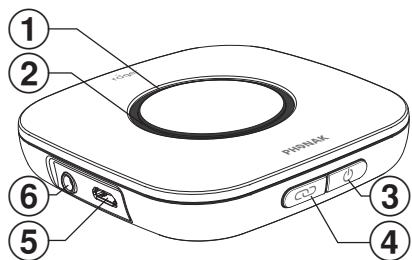



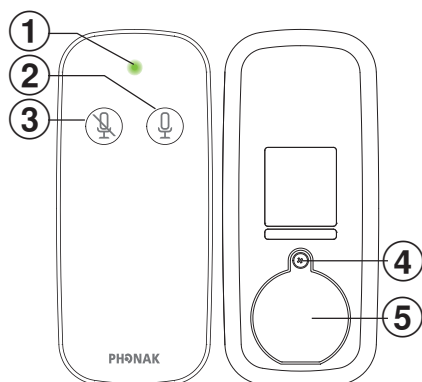


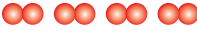


- ① Světelný indikátor
- ② Mikrofony
- ③ Zapnuto / vypnuto / ztlumění
- ④ Připojení
- ⑤ Vstup pro nabíječku
- ⑥ Audio vstup

Dálkové ovládání



- ① Světelný indikátor
- ② Neztlumeno
- ③ Ztlumeno
- ④ Šroub
- ⑤ Kryt baterie

2.4 Světelné indikátory

| <i>Světelný indikátor</i> | <i>Význam</i> |
|--|--|
|  | Zapnuto |
|  | Vypnuto |
|  | Detekován audio vstup |
|  | Mikrofon / audio vstup ztlumen |
|  | Nabíjení |
|  | Plně nabit |
|  | Vybitá baterie – dobijte mikrofon |
|  | Roger Table Mic ztratil spojení s ostatními mikrofony Roger. Stisknutím tlačítka Připojit  obnovte síťové spojení. |


3. Začínáme

3.1 Nastavení zdroje napájení


Univerzální zdroj obsahuje adaptér použitelný ve vaší zemi. Před zahájením nabíjení je nejprve třeba připojit ke zdroji správný adaptér.

1. Vyberte adaptér vhodný pro vaši zemi.


2.

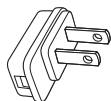


USA

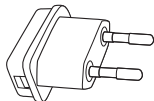

EU

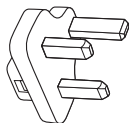


Velká
Británie

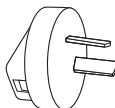

AUS


3. Vložte horní kulatý konec adaptéru do horní koncovky univerzálního zdroje.

4. Zacvakněte na své místo konec adaptéru do zámku.

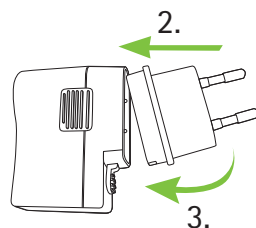


Vyjmutí / výměna:

1. Zatáhněte za úchyt na univerzálním zdroji.
2. Jemně vytáhněte adaptér nahoru a demontujte jej.

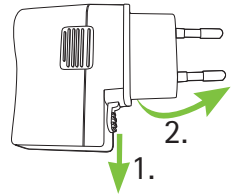

3.2 Nabíjení Roger Table Mic

Stolní mikrofon Roger Table Mic obsahuje vestavěnou lithiovou polymerovou baterii s možností rychlého dobíjení.

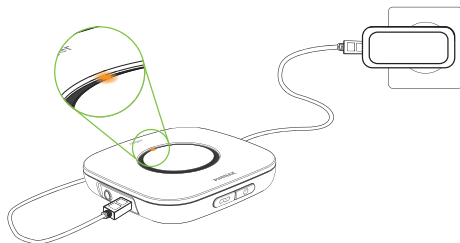


Při dobíjení Roger Table Mic připojte dodávanou nabíječku. Světelný indikátor se rozsvítí oranžově a indikuje dobíjení.

Zcela vybitá baterie se dobije na maximum zhruba za 2 hodiny. Nabíjení je ukončeno, když se světelný indikátor rozsvítí zeleně.

- ① Při prvním nabíjení Roger Table Mic jej ponechte nabíjet nejméně dvě hodiny, i když světelný indikátor baterie nesvítí nebo se rozsvítí zeleně před uplynutím této doby.

-
1. Zasuňte menší koncovku (mikro USB) napájecího kabelu do mikrofonu.
 2. Zasuňte větší koncovku (USB) napájecího kabelu do zdroje.
 3. Zasuňte zdroj do snadno dostupné zásuvky.

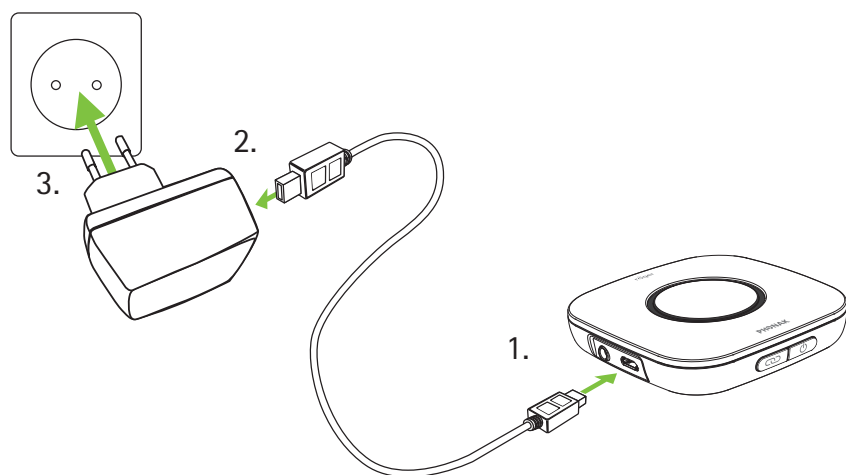

-
- ① Stolní mikrofon Roger lze rovněž nabíjet zapojením do portu USB v počítači pomocí přiloženého nabíjecího kabelu.

Světelné indikátory (stav baterie)

Světelný indikátor *Význam*



Nabíjení



Plně nabito




Vybitá baterie – dobijte Roger Table Mic. Kromě toho uslyšíte ve sluchadlech pípání.


3.3 Nastavení dálkového ovládání

V dodávaném balení je baterie dálkového ovládání chráněna plastovou fólií.

Vyjměte plastovou fólii z baterie a aktivujte tak dálkové ovládání.

3.4 Zapnutí a vypnutí

Roger Table Mic zapnete stisknutím vypínače  na jednu sekundu, dokud se světelný indikátor nerozsvítí zeleně.

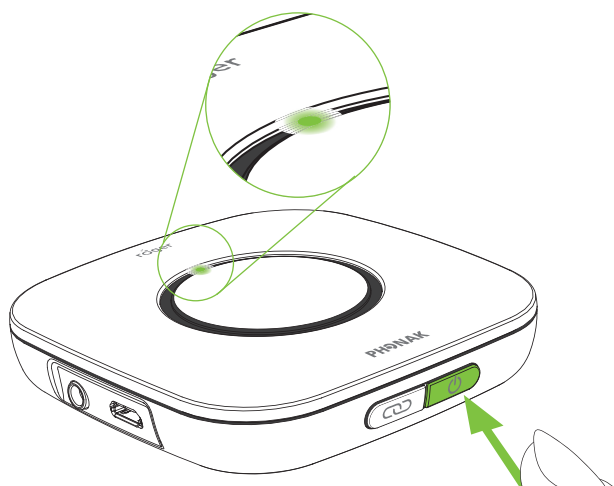

Světelný indikátor (zapínání)

| Světelný indikátor | Význam |
|--------------------|--------|
|--------------------|--------|



Zapínání




Zapnuto

3.5 Používání přijímačů Roger

Používání přijímače Roger MyLink


Je-li váš přijímač Roger typu Roger MyLink, zapněte jej a pověste si jej na krk. Ujistěte se, že sluchadla jsou v režimu T / MT / T-Coil.

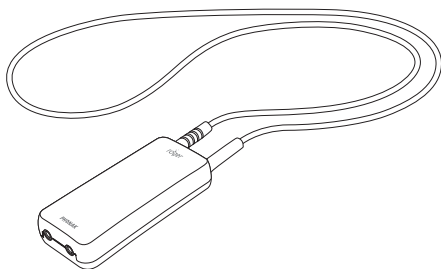

Více informací o používání univerzálního přijímače Roger MyLink naleznete v jeho uživatelské příručce.


Používání přijímačů Roger připojených ke sluchadlům


Máte-li přijímače Roger, které se připojují přímo ke sluchadlům, ujistěte se, že jsou správně připojeny a že obě sluchadla jsou nastavena na program Roger / FM / DAI / EXT / AUX.

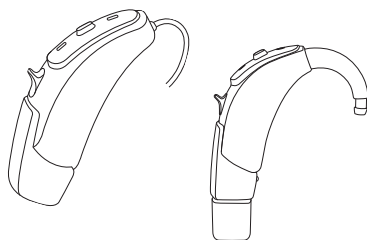

3.6 Připojení přijímače

Je možné, že váš poskytovatel sluchadel již Roger Table Mic k vašim sluchadlům připojil. Pokud ne, připojte přijímač ke stolnímu mikrofonu Roger Table Mic následujícím způsobem:

1. Ujistěte se, že Roger Table Mic i přijímač Roger jsou zapnuty.
2. Přidržte Roger Table Mic ve vzdálenosti 10 cm od přijímače Roger.
3. Na Roger Table Mic stiskněte tlačítko Připojit .

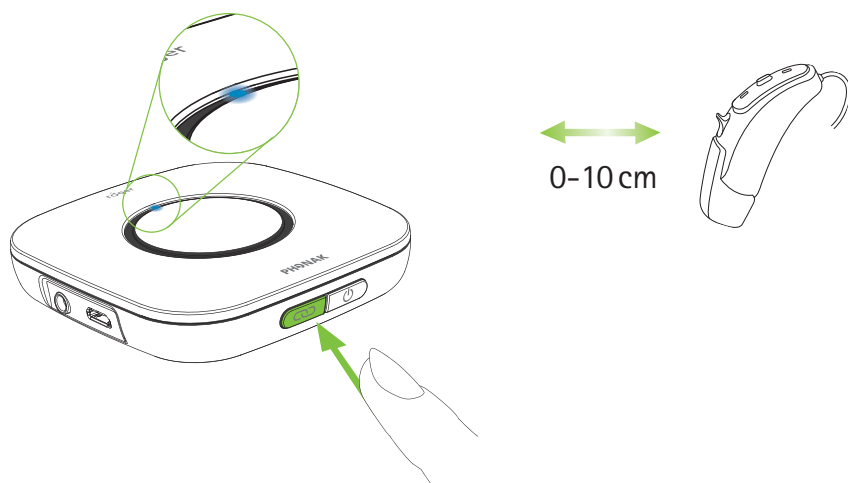


Světelný indikátor se rozsvítí na dvě sekundy zeleně, což značí, že připojení proběhlo úspěšně.

4. Opakujte kroky 2 a 3 a připojte druhý přijímač.

① Ke stolnímu mikrofonu Roger Table Mic lze připojit neomezený počet přijímačů.

Světelný indikátor (stav připojení)

Po stisknutí tlačítka  Připojit může kontrolka indikovat následující informace:

| <i>Světelný indikátor</i> | <i>Význam</i> |
|---------------------------|---------------|
|---------------------------|---------------|



Probíhá připojování



Připojení proběhlo úspěšně – přijímač Roger je úspěšně připojen ke stolnímu mikrofonu Roger Table Mic.




Roger Table Mic nenašel přijímač Roger. Posuňte Roger Table Mic blíže k přijímači Roger a ujistěte se, že je přijímač zapnutý. Poté opakujte pokus o připojení.



Přijímač Roger není kompatibilní se stolním mikrofonem Roger Table Mic.

3.7 Připojení dálkového ovládání

Dálkové ovládání je připojeno k zařízení Roger Table Mic již ve výrobě. Je-li potřeba, můžete dálkové ovládání připojit k libovolnému počtu dalších zařízení Roger Table Mic.

1. Stiskněte a přidržte na dálkovém ovládání libovolné tlačítko.
2. Zapněte Roger Table Mic stisknutím vypínače .

Roger Table Mic čtyřikrát červeně zabliká, což značí úspěšné připojení.

3. Uvolněte tlačítko na dálkovém ovládání.

Světelný indikátor (stav připojení)

Po připojení dálkového ovládání může kontrolka indikovat následující informace:

Světelný indikátor Význam




Připojení dálkového ovládání proběhlo úspěšně.

4. Používání Roger Table Mic

Roger Table Mic je flexibilní inteligentní výrobek. Zaznamenává, v jaké se nalézáte situaci, a automaticky přizpůsobí nastavení zpracování zvuku, abyste co nejlépe rozuměli řeči.

Chcete-li poslouchat skupinu lidí, umístěte Roger Table Mic doprostřed stolu.

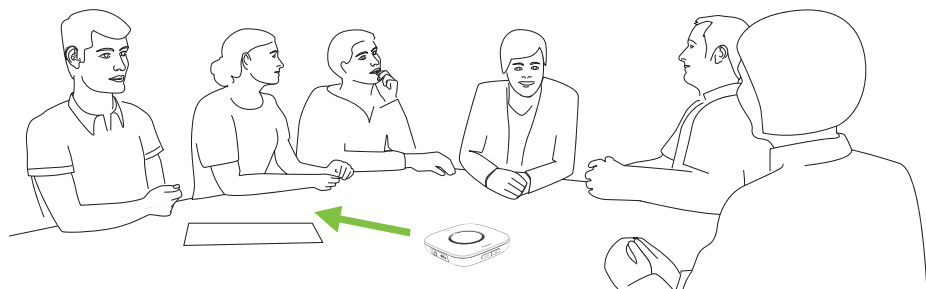


i Aby byl příjem řeči co nejlepší, nedávejte Roger Table Mic blízko zdrojů hluku jako jsou projektory nebo notebooky.

4.1 Připojení k multimediálním zařízením

Roger Table Mic můžete připojit k dalšímu zdroji zvuku – například ke konferenčnímu telefonu, tabletu či počítači – a poslouchat zvukový signál přímo prostřednictvím sluchadel.

1. Připojte jeden konec dodaného audio kabelu do vstupu aux na Roger Table Mic.

2. Druhý konec připojte ke zvukovému výstupu ze zdroje zvuku.

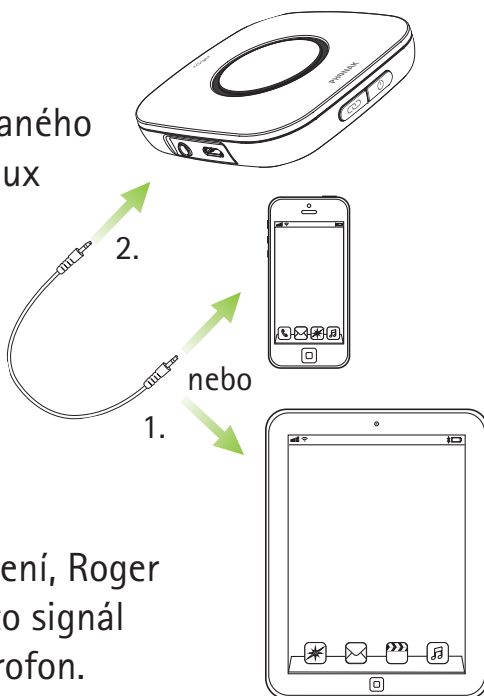


ⓘ Poté, co spustíte zvuk z multimediálního zařízení, Roger Table Mic detekuje tento signál a ztlumí vestavěný mikrofon.


5. Přidání dalších mikrofonů

Technologie Roger umožňuje připojit další mikrofony Roger a používat je souběžně.

5.1 Připojení

Při připojování dalšího mikrofonu ke stolnímu mikrofonu Roger Table Mic postupujte následovně:


1. Zapněte oba mikrofony.
2. Přidržte oba mikrofony dostatečně blízko u sebe (do 10 cm).
3. Na Roger Table Mic stiskněte tlačítko Připojit .

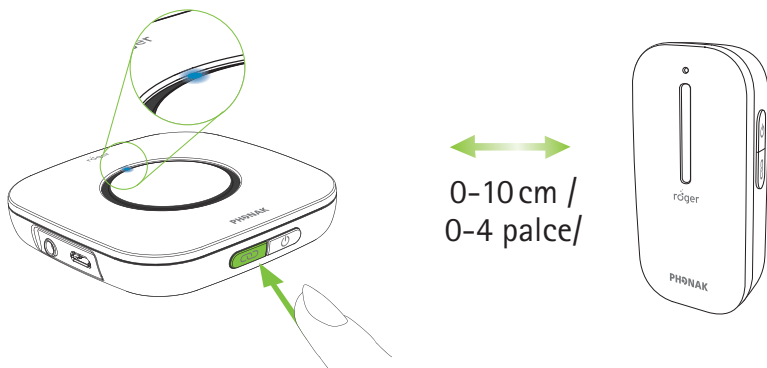

Světelné indikátory na obou mikrofonech se rozsvítí na dvě sekundy zeleně, což značí, že připojení proběhlo úspěšně.

- ① Ke stolnímu mikrofonu Roger Table Mic lze přidat až 10 dalších mikrofonů Roger Table Mic.
- ① Chcete-li připojit ke stolnímu mikrofonu Roger Table Mic vzdálený mikrofon Roger Pen, stiskněte tlačítko Připojit na zařízení Roger Pen, nikoli na Roger Table Mic.

Světelný indikátor (stav připojení)

Po stisknutí tlačítka  Připojit může kontrolka indikovat následující informace:

Světelný indikátor Význam



Připojení proběhlo úspěšně – druhý přijímač Roger je nyní úspěšně připojen k Roger Table Mic.



Roger Table Mic nenašel jiný mikrofon Roger. Posuňte Roger Table Mic blíže ke druhému mikrofonu Roger a ujistěte se, že oba mikrofony jsou zapnuté. Poté opakujte pokus o připojení.




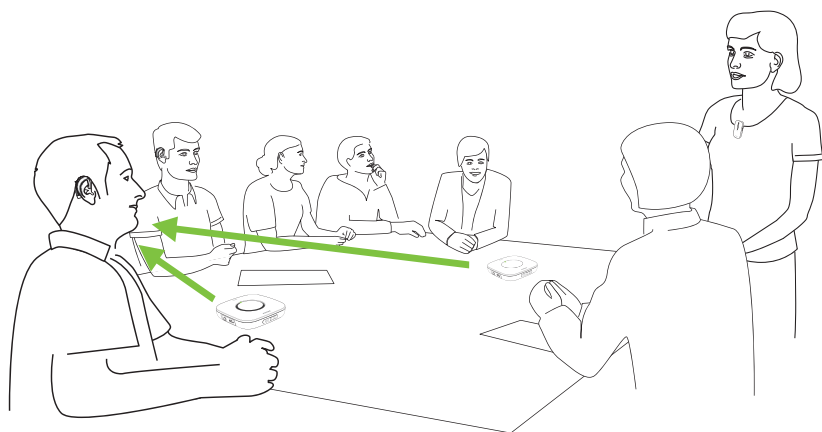
Druhý mikrofon Roger není kompatibilní se stolním mikrofonem Roger Table Mic. Aktualizujte software pomocí programu Roger Upgrader nebo kontaktujte svého poskytovatele sluchadel.

5.2 Přidání dalších mikrofonů

Další stolní mikrofony Roger Table Mic se rozmísťují tak, abyste slyšeli, co říkají lidé kolem stolu. Předejte přenosné mikrofony Roger řečníkům. Ujistěte se, že jsou umístěny správným způsobem (směřování k ústům, ve vzdálenosti do 20 cm od řečníka).

Mikrofony Roger automaticky detekují, když někdo mluví, a následně začnou kontinuálně vysílat hlas do sluchadel.

Jestliže řečník, který má na sobě mikrofon, potřebuje dočasně opustit skupinu, je vhodné, aby mikrofon pevným stisknutím vypínače  ztlumil.




-
- ① Jestliže dojde k problému se sítí, obnovte síť stisknutím tlačítka  Připojit na mikrofonu.

Světelný indikátor (stav více mikrofonů)


Při používání více mikrofonů Roger může kontrolka indikovat následující informace:

Světelný indikátor Význam



Mikrofon Roger je ztlumený. Aktivujte jej znovu stisknutím vypínače  nebo tlačítka pro ztlumení na dálkovém ovládní.





Roger Table Mic ztratil spojení s ostatními mikrofony Roger. Stisknutím tlačítka Připojit  obnovte síťové spojení.

6. Další funkce

6.1 Ztlumení

Ztlumení mikrofonu se hodí především během přestávek jednání nebo když se chcete zaměřit na řečníka, aniž by vás rušil rozhovor dalších účastníků.

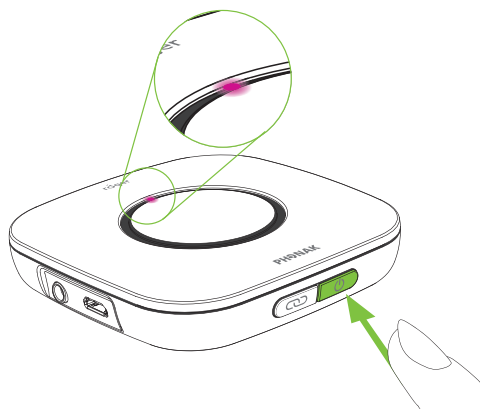

1. Silným stisknutím vypínače  nebo tlačítka ztlumení na dálkovém ovládaní ztlumte Roger Table Mic nebo audio vstup.

Při ztlumení se světelný indikátor rozsvítí fialově.

2. Stisknutím vypínače nebo tlačítka ztlumení na dálkovém ovládaní můžete Roger Table Mic nebo audio vstup znovu zapnout.


Světelný indikátor (ztlumení)


Světelný indikátor Význam



Mikrofon / audio vstup ztlumen



6.2 Odpojení zařízení Roger (NewNet)

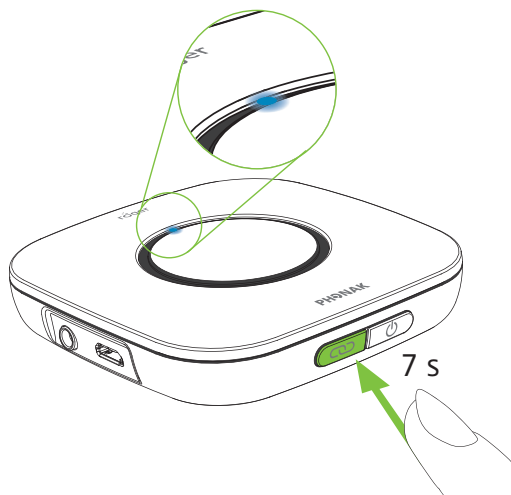Chcete-li odpojit Roger Table Mic od připojeného přijímače nebo od ostatních mikrofonů Roger, stiskněte tlačítko Připojit  na 7 sekund. Po odpojení Roger Table Mic od všech připojených zařízení se světelný indikátor rozsvítí oranžově.



Nyní můžete znovu k Roger Table Mic připojovat přijímače Roger nebo Roger Table Mic.

Resetování

Jestliže Roger Table Mic přestane reagovat na příkazy, můžete jej resetovat současným stisknutím vypínače  a tlačítka Připojit  na 10 sekund.

7. Řešení problémů

| <i>Příčiny</i> | <i>Řešení</i> |
|--|---|
| Nedaří se mi Roger Table Mic zapnout | |
| ■ Baterie je vybitá | ■ Nabijte Roger Table Mic po dobu nejméně dvou hodin |
| Nerozumím řečníkovi | |
| ■ Mikrofon není správně umístěný | ■ Posuňte Roger Table Mic blíže k řečníkovi |
| ■ Otvory mikrofonu jsou zaneseny nečistotou nebo zakryty nějakým předmětem | ■ Ujistěte se, že otvory mikrofonu nejsou zaneseny nečistotou nebo zakryty nějakým předmětem |
| Neslyším řečníka, i když je Roger Table Mic zapnutý | |
| ■ Mikrofon je ztlumený | ■ Zkontrolujte světelný indikátor – je-li fialový, krátkým stisknutím vypínače zapněte mikrofony |
| ■ Nemáte sluchadla nastavená na správný program | ■ Zkontrolujte, zda jsou vaše sluchadla nastavena na správný program (Roger / FM / DAI / EXT / AUX) |
| ■ Přijímače Roger nejsou připojeny ke stolnímu mikrofonu Roger Table Mic. | ■ Přidržte Roger Table Mic postupně poblíž jednotlivých přijímačů Roger a stiskněte tlačítko Připojit |
| ■ Roger Table Mic byl součástí sítě | ■ Na Roger Table Mic stiskněte tlačítko Připojit |

| <i>Příčiny</i> | <i>Řešení</i> |
|---|--|
| Stále ztrácím audiosignál | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Vzdálenost mezi Roger Table Mic a přijímačem Roger je příliš velká ■ Mezi vámi a Roger Table Mic jsou překážky | <ul style="list-style-type: none"> ■ Přemístěte se blíž k Roger Table Mic ■ Ujistěte se, že na Roger Table Mic vidíte (je ve vašem přímém zorném poli) |
| Hlasitost mého multimediálního zařízení je příliš nízká | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Zvyšte nastavení hlasitosti | <ul style="list-style-type: none"> ■ Zvyšte hlasitost zdroje zvuku |
| Neslyším své multimediální zařízení | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Zdroj zvuku je ztlumený ■ Roger Table Mic je ztlumený ■ Roger Table Mic používá audio kabel, avšak není zapnutý | <ul style="list-style-type: none"> ■ Zrušte ztlumení zdroje zvuku ■ Zrušte ztlumení Roger Table Mic ■ Zapněte Roger Table Mic, abyste mohli poslouchat zdroj zvuku přes audio kabel |
| Roger Table Mic je zapnutý, ale světelný indikátor bliká modře | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Roger Table Mic byl součástí sítě | <ul style="list-style-type: none"> ■ Na Roger Table Mic stiskněte tlačítko Připojit |
| Světelný indikátor na Roger Table Mic bliká červeně (dvojitě bliknutí) | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Baterie v mikrofonu je vybitá | <ul style="list-style-type: none"> ■ Co nejdříve Roger Table Mic dobijte |


7. Řešení problémů

| <i>Příčiny</i> | <i>Řešení</i> |
|---|--|
| Roger Table Mic přestal pracovat | |
| ■ Softwarový problém | ■ Současným stisknutím vypínače a tlačítka Připojit Roger Table Mic restartujte |
| Nedaří se mi propojit můj Roger Table Mic s jiným mikrofonem Roger | |
| ■ Mikrofon není zapnutý | ■ Ujistěte se, že obě zařízení jsou zapnutá |
| ■ Mikrofon není dostatečně blízko | ■ Posuňte mikrofon blíž k Roger Table Mic |
| ■ Došlo k narušení sítě mikrofonu | ■ Silně stiskněte tlačítko Připojit na jednom mikrofonu a restartujte tak síť |
| ■ Software není kompatibilní | ■ Aktualizujte všechny mikrofony Roger pomocí nástroje Roger Upgrader, jenž je k dispozici na internetových stránkách společnosti Phonak, nebo kontaktujte lokálního distributora značky Phonak. |
| Dálkové ovládání nereaguje | |
| ■ Baterie je vybitá | ■ Vyměňte baterii (typ CR2032) |

8. Důležité informace

8.1 Důležité bezpečnostní informace

 Před použitím zařízení Phonak si přečtěte informace na následujících stránkách.

 Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že nemá být ukládán společně s běžným komunálním odpadem. Jste zodpovědní za to, že nepotřebné zařízení bude zlikvidováno samostatně mimo běžný komunální odpad. Správnou likvidací starých zařízení zabráníte negativním dopadům na životní prostředí i zdraví osob.

8.2 Výstrahy

- ⚠ Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí do 3 let.
- ⚠ Otevírání zařízení jej může poškodit. Pokud se objeví potíže, které nelze vyřešit pomocí nápravných postupů uvedených v kapitole řešení problémů této uživatelské příručky, zkontaktujte je s vaším poskytovatelem zařízení.
- ⚠ Opravy zařízení by mělo provádět pouze autorizované servisní středisko. Změny nebo úpravy zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Phonak, nejsou dovoleny.
- ⚠ Elektrické komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy.
- ⚠ Nepoužívejte zařízení v místech, kde je zakázáno používat elektronické přístroje. V případě nejasností se obraťte na odpovědnou osobu.
- ⚠ Zařízení by se nemělo používat v letadlech, pokud to výslovně nepovolí palubní personál.

-
- ⚠ Externí zařízení by se měla připojovat pouze v případě, byla-li otestována v souladu s normami IECXXXXX.
 - ⚠ Používejte pouze příslušenství schválené společností Phonak AG.
 - ⚠ Použití zařízení, které je jakýmkoliv způsobem v rozporu se zamýšleným účelem konektorů a kabelů (např. nošením USB kabelu kolem krku) může způsobit poranění.
 - ⚠ Při práci v průmyslové výrobě se ujistěte, že se ve stroji nezachytily žádné části vašeho zařízení.
 - ⚠ Nenabíjejte přístroj, máte-li jej na těle.
 - ⚠ Upozornění: nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nezasunujte samotnou zástrčku do elektrických zásuvek.
 - ⚠ Zařízení nepoužívejte v prostředí, kde se pracuje s výbušninami (prostředí s vysokou koncentrací kyslíku, doly nebo průmyslové oblasti s nebezpečím výbuchu).

8.3 Informace týkající se bezpečnosti výrobku

- ① Chraňte zařízení před nadměrnými otřesy a vibracemi.
- ① Nevystavujte zařízení teplotám a vlhkosti mimo doporučené provozní podmínky uvedené v této uživatelské příručce.
- ① Nikdy nepoužívejte mikrovlnnou troubu nebo jiné tepelné přístroje za účelem vysušení zařízení.
- ① Zařízení čistěte vlhkou tkaninou. K čištění zařízení nikdy nepoužívejte čisticí prostředky pro domácnost (prací prášek, mýdlo atd.) nebo alkohol.
- ① Z bezpečnostních důvodů používejte pouze nabíječky se vstupním napětím 5 V DC, min. 500 mA.
- ① K zařízení nepřipojujte kabel USB nebo audio kabel delší než 3 m.
- ① Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte je a bezpečně uložte.

-
- ① Chraňte zařízení před nadměrnou vlhkostí (koupání, plavání), horkem (radiátor, palubní deska v autě) nebo přímým kontaktem s potem (cvičení, fitness, sport).
 - ① Rentgenové záření a vyšetření CT nebo MR mohou zařízení zničit nebo negativně ovlivnit jeho funkci.
 - ① Při připojování zařízení ke kabelům nepoužívejte nadměrnou sílu.
 - ① Vložte zařízení do dokovací stanice dle nákresu. Nesprávným vložením se zařízení může poškodit.
 - ① Chraňte všechny otvory (mikrofony, audio vstup a nabíječka) před nečistotami a špínou.
 - ① Jestliže zařízení spadlo nebo se poškodilo, jestliže se přehřeje během nabíjení, má-li poškozený kabel nebo zástrčku či spadlo-li do kapaliny, přestaňte je používat a kontaktujte svého poskytovatele zařízení.
 - ① Ve výrobku jsou vloženy nevyměnitelné baterie. Tuto baterii lze nabíjet a vybijet mnohokrát, ale postupně se opotřebovává. Baterii smí poté vyměnit pouze autorizovaný servis.

8.4 Další důležité informace

- Osoby s kardiostimulátory nebo jinými zdravotnickými pomůckami by měly VŽDY konzultovat situaci s lékařem nebo výrobcem zařízení, NEŽ je začnou používat. Používání zařízení společně s kardiostimulátorem nebo jinými zdravotnickými pomůckami by mělo být VŽDY v souladu s bezpečnostními doporučeními lékaře zodpovědného za kardiostimulátor nebo výrobce kardiostimulátoru.
- Zařízení sbírá a ukládá interní technická data. Tato data může načíst poskytovatel zařízení, aby mohl zařízení zkontrolovat a pomoci vám je správně používat.
- Digitální signál zaslaný ze zařízení do připojeného přijímače nemohou odposlouchávat jiná zařízení, která nejsou v síti tohoto mikrofónu.

9. Servis a záruka

9.1 Platnost záruky

Na výrobek je poskytována záruční doba v souladu s platným občanským zákoníkem ČR, která vstupuje v platnost v den nákupu.

9.2 Mezinárodní garance

Společnost Phonak poskytuje na tento výrobek omezenou mezinárodní garanci v délce jednoho roku. Tato omezená garance se vztahuje pouze na výrobní vady a vady materiálu. Garance je platná pouze při předložení řádně vyplněného záručního listu.

Mezinárodní garance nemá vliv na žádná práva odvíjející se od platných národních právních norem pro prodej spotřebního zboží.

9.3 Omezení záruky

Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávnou manipulací nebo používáním, vystavením chemikáliím, vniknutím vody nebo nadměrným namáháním. Poškození způsobené třetími stranami nebo neautorizovanými servisními středisky činí záruku na níže uvedený výrobek neplatnou. Tato záruka se nevztahuje na servisní zásahy provedené poskytovatelem zařízení v jeho provozovně.

Sériové číslo:

Autorizovaný
poskytovatel
(razítko / podpis):

Datum zakoupení:

10. Informace a vysvětlení k symbolům



Symbolem CE společnost Phonak AG potvrzuje, že tento výrobek společnosti Phonak vyhovuje požadavkům směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích i požadavkům směrnice R&TTE 1999/5/ES o rádiových a telekomunikačních zařízeních.



Tento symbol znamená, že je důležité, aby si uživatel přečetl relevantní informace uvedené v této uživatelské příručce a řídil se jimi.



Tento symbol znamená, že je důležité, aby se uživatel řídil relevantními upozorněními uvedenými v této uživatelské příručce.



Důležité informace týkající se manipulace s výrobkem a jeho bezpečnosti.

Provozní podmínky

Výrobek byl navržen pro bezproblémový provoz bez omezení, pokud je užíván k určeným účelům, není-li v této uživatelské příručce uvedeno jinak.



Štítek shody s australskými předpisy o EMC a rádiových komunikacích.



Provozní teplota: 0 ° až +40 °C.
Skladovací teplota: -10 ° až +60 °C.



Vlhkost vzduchu při přepravě: Až 90% (nekondenzující).
Vlhkost vzduchu při skladování: 0% až 70%, pokud se zařízení nepoužívá.



Atmosférický tlak: 500 hPa až 1 100 hPa.



Symbol s přeškrtnutou popelnicí znamená, že zařízení nesmíte odhodit do běžného domovního odpadu. Staré nebo nepoužívané zařízení odevzdejte na sběrném místě určeném ke shromažďování elektronického odpadu nebo je dodejte svému poskytovateli zařízení k náležité likvidaci. Správnou likvidací chráníte životní prostředí a zdraví. Ve výrobku jsou vloženy nevyměnitelné baterie. Nepokoušejte se výrobek otevřít nebo vyměnit baterie, neboť hrozí nebezpečí poranění či poškození výrobku. Vyjmutí baterie svěřte místnímu recyklačnímu závodu.





Phonak Communications AG
Laenggasse 17
CH-3280 Murten
Švýcarsko

Dovozce pro ČR:

REJA spol. s r. o.

www.reja.cz

www.phonak.cz

www.sluchadla-deti.cz

www.komunikacnisystem.cz

www.audiodum.cz

www.phonak.com

